



Tre viktige steg du kan gjøre hjemmefør du starter DEXCOM G6 med din Tandem t:slim X2

Det er nå på tide å starte Dexcom G6-systemet* sammen med din Tandem t:slim X2™ insulinpumpe. Dersom du vil bruke en smarttelefon som enhet og få til gang til følgerfunksjonen, må du forberede tre viktige steg før CGM-starten. Dette for at du skal få en så smidig start som mulig. Du finner disse tre stegene beskrevet i denne folderen. Har du spørsmål må du ikke være redd for å sende mail eller ringe vår kundesupport, så hjelper vi deg.

* *Kontrollér at din enhet er kompatibel på:
<https://www.dexcom.com/compatibility>*

Steg 1: Last ned DexcomG6-appen

(for deg som har sensoren på deg)



1. Last ned Dexcom G6-appen fra App Store eller Google Play.
2. Opprett en Dexcom-konto (hvis du ikke allerede har en) i appen. Du kan også opprette en konto på www.dexcom.com. Logg så inn i Dexcom-appen med samme påloggingsdata.
3. Les sikkerhetsinformasjonen som kommer opp, men stopp når det er klart til å legge inn senderens ID-nummer. Resten gjør vi på klinikken ved oppstarten.

OBS! Vær nøye med å skrive ned og ta vare på brukeropplysningene dine! Først og fremst brukernavn og passord er viktige for å kunne logge inn.

Tenk på at:

Sensorperioder skal alltid startes i pumpen først. Appen er kun en visningsenhet!

Slå av Bluetoothfunksjonen på telefonen for å ikke forstyrre når senderen kobler seg til pumpen.

Visningsnavn

E-postadresse

Brukernavn (Brukes ved innlogging)

Passord (Brukes ved innlogging)

Steg 2: Koble Dexcom G6-appen til Glooko



Dine glukoseverdier overføres fra Dexcom G6-appen til Glooko via 'skyen'. Du trenger altså ikke å bruke kabel eller datamaskin for å overføre verdiene. Det eneste du trenger å gjøre er å koble sammen Dexcom kontoen (G6-appen) med Glooko kontoen din. Du kan også gi klinikken din tillatelse til å se glukoseverdiene dine i Glooko ved å oppgi klinikkens ProConnect-kode. Dersom du ønsker å se doseringshistorikken fra din Tandem t:slim X2, må du laste ned pumpen ved hjelp av en micro-USB kabel (som følger med pumpen), enten på klinikken eller via din egen datamaskin, til Glooko. Informasjon om hvordan laste ned pumpens historikk via din egen datamaskin finnes lengre bak i denne brosjyren.

1. Gå inn på myglooko.com og logg på din Glooko-konto. Hvis du ikke har en konto, må du opprette en.
2. Klikk på 'Innstillinger' ved initialene dine i høyre hjørnet. Scroll ned til 'Apper og enheter'. Velg 'Koble til Dexcom'.
3. Angi brukernavn og passord for **din Dexcom-konto**. Følg instruksjonene.
4. Scroll opp til 'Konto' og skriv inn klinikkens ProConnect-kode for å gi klinikken tillatelse til å se verdiene dine i Glooko.
5. Last ned Glooko-appen i mobilen og logg inn med Glooko på loggingen din. Verdiene overføres automatisk til Glooko etter kun 3-4 timer.

Tenk på at:
Du kan kun laste ned historikk fra pumpen via en datamaskin. Til det kreves programvaren Glooko Uploader.

Har du spørsmål om Glooko – nøl ikke med å ta kontakt med Glooko support på telefonnr: +47 800 15 999 eller help@glooko.com. Du kan også finne informasjon på support.glooko.com

OBS! Vær nøye med å skrive ned og ta vare på brukeropplysningene dine.

Brukernavn (mailadresse)

Passord

ProConnect-kode klinikk

Steg 3: Last ned Dexcom Follow-appen (for deg som skal bruke følgerfunksjonen)

Med Dexcom G6 får du muligheten til å dele glukoseverdiene med f.eks. foreldre, eller andre som kan være en ekstra støtte. Du kan maksimalt ha 10 følgere.



1. Følgeren laster ned Dexcom Follow fra App Store eller Google Play.
2. Du som bruker må invitere den du vil skal følge deg ved å sende en e-post fra din Dexcom-app. Du kan invitere opp til 10 følgere og alle følgerne kan ha individuelt innstilte alarmgrenser i sin telefon.
3. **OBS!** Når du inviterer følgere via e-post må følgeren kunne åpne e-posten i mobilen/nettbrettet, dvs. den enheten der følgerappen er lastet ned på. Invitasjonen kan noen ganger havne i mottakers søppelpost. Be følgeren kontrollere søppelposten dersom ikke invitasjonen har kommet frem.

Slik overfører du historikk fra insulinpumpen Tandem t:slim X2 til Glooko via en datamaskin.


For å kunne laste ned pumpen til Glooko trenger du din originale micro-USB kabel som fulgte med pumpen, og programvaren Glooko Uploader installert på datamaskinen din. Følg stegene nedenfor for å laste ned programvaren Glooko Uploader, og begynne å bruke den.

1. Gå inn på myglooko.com og logg inn på Glooko kontoen din.
2. Klikk på 'Innstillinger' ved initialene dine i høyre hjørnet. Scroll ned til 'Apper og enheter'.
3. Klikk på 'Last ned Glooko Uploader' og velg PC eller Mac.
4. Lagre installasjonsfilen på datamaskinen.
5. Finn installasjonsfilen og følg instruksjonene for å installere Glooko Uploader.
6. Start datamaskinen på nytt og åpne deretter Glooko Uploader.
7. Koble pumpens Micro-USB kabel til datamaskinen.
8. Koble pumpen til Micro-USB kabelen.
9. Start overføring av data fra pumpen.
10. Logg inn på myglooko.com for å se dataene dine.

DEXCOM G6: Slik fungerer det.



Systemets 'hjerne' finnes i senderen

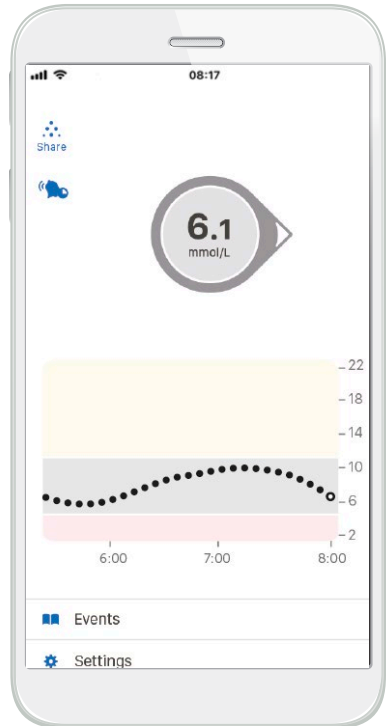



Smarttelefon* med Dexcom-app



Tandem t:slim X2 insulinpumpe

Bildene i Dexcom appen og Follow appen er kun visningseksempler

*For kompatible enheter se <https://www.dexcom.com/compatibility>

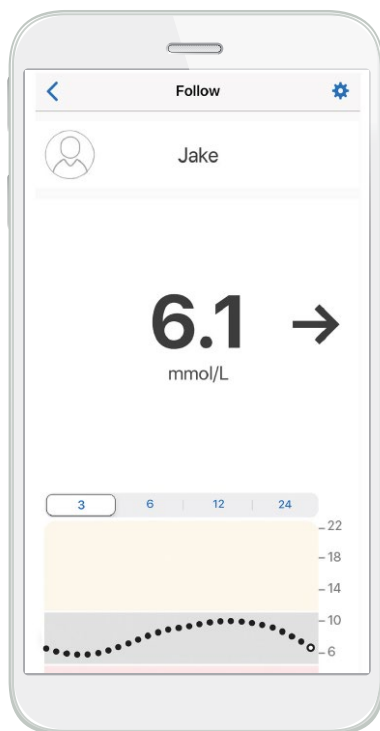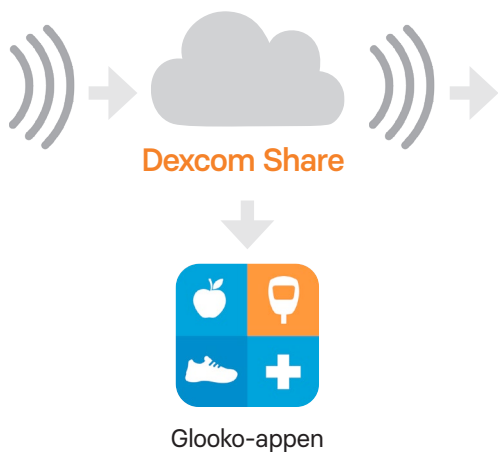

Følgerens smarttelefon*
med Dexcom Follow

For siste nytt, bli en del av vårt samfunn på

facebook.com/rubinmedicalnorge
instagram.com/rubinmedicalnorge

Support telefon: 480 80 831

www.rubinmedical.no

Rubin
medical

© 2023 Rubin Medical AS. Alle rettigheter forbeholdes. Tandem Diabetes Care er et registrert varemerke og t:slim X2 er varemerker som tilhører Tandem Diabetes Care Inc. Dexcom og Dexcom G6 er registrerte varemerker som tilhører Dexcom Inc. i USA og andre land. Andre varemerker fra tredjepart tilhører deres respektive eiere.