



Tre viktige steg

å gjøre hjemme før du starter Dexcom G7 sammen med insulinpumpen Tandem t:slim X2

Nå er det på tide å starte Dexcom G7 CGM sammen med din Tandem t:slim X2™ insulinpumpe.

Hvis du ønsker å bruke smarttelefonen din* som avlesningsenhet, og for å få tilgang til følgefunksjonen, må du forberede tre viktige steg før CGM-starten. Alt for at du skal få en så smidig start som mulig. Du finner disse tre stegene beskrevet i denne brosjyren.

Har du noen spørsmål, ikke nøl med å ringe eller sende e-post til vår kundestøtte, så hjelper vi deg.

* Sjekk at enheten din er kompatibel på:
<https://www.dexcom.com/compatibility>



Trinn 1

Last ned Dexcom G7-appen.

(for deg som bruker sensoren)

1. Last ned Dexcom G7-appen:



Dexcom G7



App Store



Google Play

2. Opprett en Dexcom-konto i G7-appen. Eller logg inn med brukernavnet og passordet til din eksisterende Dexcom-konto hvis du allerede har en.

MERK! Det må være en person over 18 år som er ansvarlig for kontoen. Er du under 18 år, opprett en konto for mindreårige.

3. Resten gjør vi på klinikken ved oppstart av pumpen.

MERK! Vær nøye med å skrive ned og lagre dine brukeropplysninger! Spesielt brukernavn og passord er viktige for å kunne logge inn.

Husk på at:

Sensorperioder skal alltid startes via pumpen først, appen er kun en visningsenhet!

E-postadresse/Brukernavn (brukes ved innlogging)

Brukernavn for mindreårig-konto

Passord (brukes ved innlogging)

Trinn 2

Koble Dexcom G7-appen til Glooko

Fra Dexcom G7-appen overføres glukoseverdiene dine til Glooko via "skyen". Du trenger derfor ikke å bruke kabel eller datamaskin for å overføre verdiene. Det eneste du trenger å gjøre er å koble sammen Dexcom-kontoen din (G7-appen) med Glooko-kontoen din. Du kan også gi klinikken tillatelse til å se glukoseverdiene dine i Glooko ved å oppgi klinikken ProConnect-kode. Hvis du vil se doserings-

historikken fra din Tandem t:slim X2™, må du laste ned pumpen ved hjelp av en mikro-USB-kabel (som følger med pumpen), enten på klinikken eller via din egen datamaskin, til Glooko. Informasjon om hvordan du laster ned pumpens historikk via din egen datamaskin finnes bakerst i denne brosjyren.

1. Last ned Glooko-appen på telefonen din og logg inn med ditt Glooko-brukernavn og passord. Du kan også gå til myglooko.com via en datamaskin. Hvis du ikke har en konto, opprett en.



Glooko



App Store



Google Play

2. Via appen: Gå til "Synkronisere enhet" og klikk på "Ny enhet". Velg "Kontinuerlig glukosemåler" og deretter "Dexcom" og "Legg til". Via nettsiden: Klikk øverst til høyre. Gå til innstillinger og bla ned til "Apper og enheter" og klikk på "Dexcom".

3. Oppgi brukernavnet og passordet til **din Dexcom-konto**. Følg instruksjonene.

4. Velg "Legg til omsorgsteam" i appen og skriv inn klinikkens ProConnect-kode for å gi klinikken tillatelse til å se verdiene dine i Glooko.

5. Verdiene overføres automatisk til Glooko etter bare 3–4 timer.

Tilleggs-kommentar:

Du kan kun laste opp historikken fra pumpen din via en datamaskin. Dette krever Glooko Uploader-programvaren.

Hvis du har spørsmål om Glooko, ikke nøl med å kontakte Glooko support på telefon 800 15 999 eller via e-post help@glooko.com. Du kan også finne informasjon på support.glooko.com.

MERK: Vær nøye med å skrive ned og lagre dine brukeropplysninger!

Brukernavn (e-postadresse)

MERK: Hvis du skal koble til en mindreårigs konto til Glooko, må du oppgi e-postadressen til Dexcom-kontoen.

Passord

Klinikkens ProConnect-kode

Trinn 3

Last ned Dexcom Follow-appen

(for deg som skal bruke følgefunksjonen)

Med Dexcom G7 får du muligheten til å dele glukoseverdiene dine med for eksempel foreldre, eller noen andre som kan være en ekstra støtte. Du kan ha opptil 10 følgere.

1. Følgeren laster ned Dexcom Follow-appen:



Dexcom Follow



App Store



Google Play

2. Som bruker inviterer du den du vil skal følge deg ved å sende en e-post fra din Dexcom G7-app. Du kan invitere opptil 10 følgere, og hver følger kan ha sine egne individuelt innstilte alarmer.
3. **MERK!** Når du inviterer en følger via e-post, må følgeren kunne åpne e-posten på sin mobiltelefon/nettbrett, det vil si den enheten der følgeappen er lastet ned. Invitasjonen kan noen ganger ende opp i følgerens søppelpost. Be følgeren sjekke søppelposten hvis invitasjonen ikke har kommet fram.


Slik overfører du historikk fra insulinpumpen Tandem t:slim X2™ til Glooko via en egen datamaskin:

For å kunne laste ned pumpen til Glooko trenger du din originale mikro-USB-kabel som fulgte med pumpen, og programvaren Glooko Uploader installert på datamaskinen din. Følg disse trinnene for å laste ned programvaren Glooko Uploader og begynne å bruke den:

1. Gå til myglooko.com og logg inn på din Glooko-konto.
2. Klikk på "Innstillinger" ved dine initialer i øvre høyre hjørne. Rull ned til "Apper og enheter".
3. Klikk på "Få Glooko Uploader" og velg PC eller Mac.
4. Lagre installasjonsfilen på din datamaskin.
5. Finn installasjonsfilen og følg instruksjonene for å installere Glooko Uploader.
6. Start datamaskinen på nytt og start deretter Glooko Uploader.
7. Koble pumpens mikro-USB-kabel til din datamaskin.
8. Koble pumpen til mikro-USB-kabelen.
9. Start overføring av data fra pumpen din.
10. Logg inn på myglooko.com for å se dine data.



Dexcom G7: slik virker det

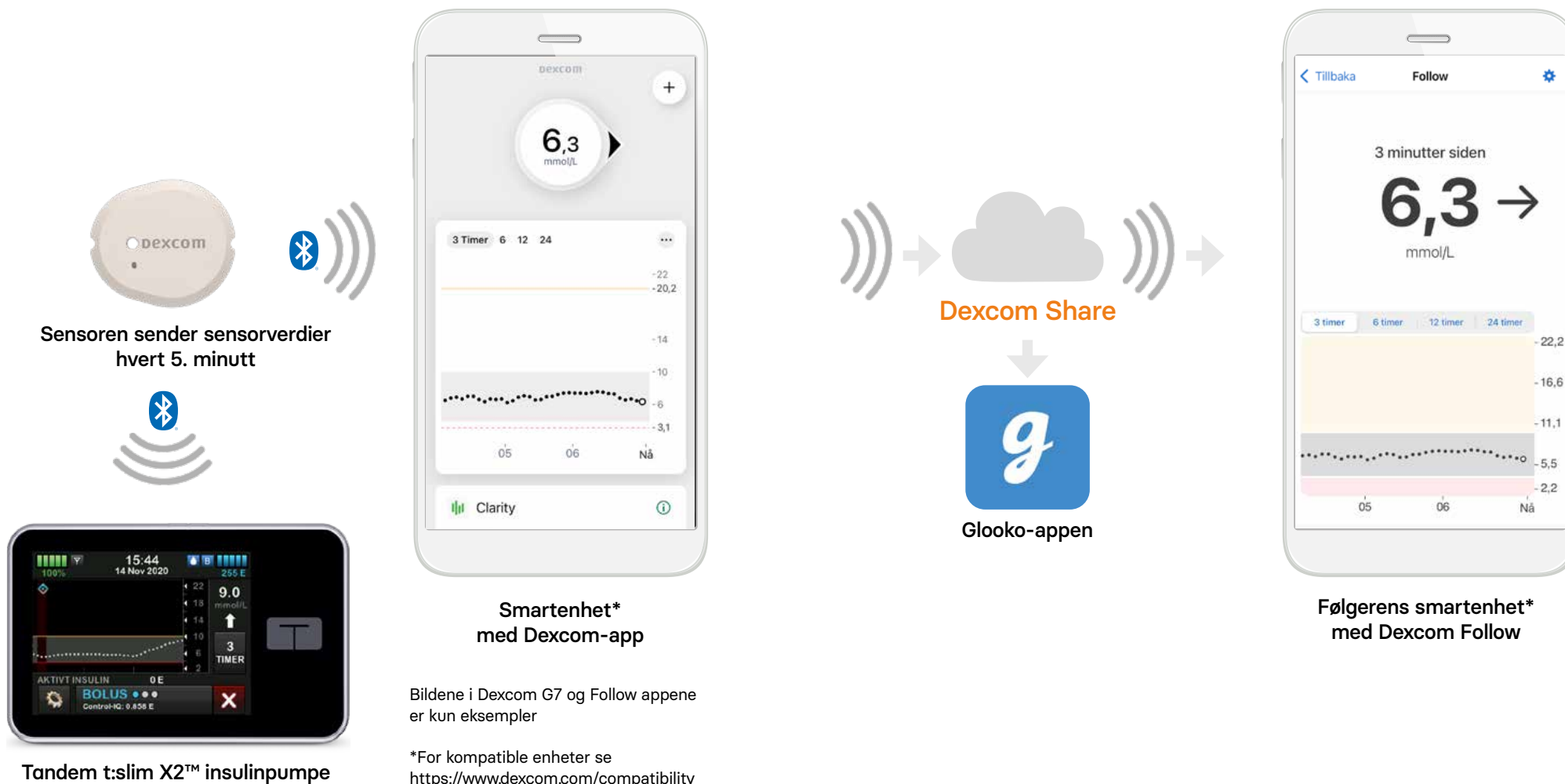

Vi hjelper mennesker til en tryggere hverdag

Med diabeteshjelpemidler fra verdensledende produsenter og et team av dedikerte medarbeidere er vi på Rubin Medical stolte av å kunne hjelpe en stor gruppe mennesker til en enklere og tryggere hverdag.

Våre produkter foreskrives alltid av spesialister og vi har tett samarbeid med diabetespoliklinikker i hele Norge. Instruksjonsfilmer, historier fra brukere og spørsmål og svar om våre produkter finner du på www.rubinmedical.no

Følg oss på sosiale medier:

facebook.com/rubinmedicalnorge
instagram.com/rubin.medicalnorge

Sentralbord hverdager kl. 08.00–16.00: **480 80 830**

Døgnåpen teknisk pumpesupport: **480 80 831**

www.rubinmedical.no

